

Ceramco[®]3

Продукция
для
зуботехнической
лаборатории

- ▶ керамика Ceramco3
- ▶ сплав Mealloy
- ▶ паковка Meavest
- ▶ печи Multimat

Уважаемые господа! Компания «Стоматорг» совместно с компанией Dentsply рада пригласить вас на практические семинары по работе с массами Ceramco³.

Темы:

- ▶ Базовый уровень работы с керамической массой Ceramco³: техника послойного нанесения керамических масс Ceramco³.
- ▶ «Многообразие цвета и формы». Продвинутый уровень работы с керамической массой Ceramco³: нанесение массы при дефиците места (имитация старости); воссоздание «молодого» и «пожилого» зуба; нанесение керамических масс методом латеральной сегментации.
- ▶ Послойное нанесение керамики на патологически смещенные группы зубов с учетом влияния света на форму зуба.
- ▶ Искусство создания фронтальных виниров.
- ▶ Основные аспекты литья, ошибки и методы их устранения. Пайка.

Наши лекторы:



Кароу Роберт

Мастер-техник, глава лаборатории *Dentsply Export* в Англии, также возглавляет тренинг-центры в Стамбуле и Каире.



Шайбаков Константин

Официальный техник-консультант компании *Dentsply* в России.



Кузьмиченко Ростислав

Официальный техник-консультант компании *Dentsply* в Киеве.



Суботович Катаржина

Зубной техник, официальный инструктор-консультант компании *Dentsply*, проводит международные презентации, лекции и практические курсы (Австрия, Албания, Хорватия, Чехия, Россия и другие страны СНГ).



Оганян Сергей

Официальный техник-консультант компании *Dentsply* в России. Специализируется на изготовлении керамических коронок с опорой на имплантат и керамические реставрации при патологическом изменении челюстно-лицевой структуры.

**Запись на обучение
обязательна!**

Тел. (495) 642-64-33,

**Орехова Карина
(k.orehova@stomatorg.ru),**

**Жидкова Алена
(a.jidkova@stomatorg.ru);**

www.stomatorg.ru

Преимущества керамики Ceramco³

- ▶ Натуральная полевошпатная керамика обладает отличной стабильностью, выдерживает многократный обжиг.
- ▶ Великолепно зарекомендовала себя в сочетании с большинством стоматологических сплавов.
- ▶ Уникальная система пастообразных опалов в сочетании с кристаллами дает непревзойденный эффект глубины цвета и флуоресценции.
- ▶ Отлично маскирует металлический колпачок, что позволяет изготавливать работы при дефиците места.
- ▶ Не трескается и не оплывает.
- ▶ Выдерживает перепады температуры в 100 °С.
- ▶ Не стирает зубы-антагонисты.
- ▶ Проста в применении.
- ▶ С помощью масс вы сможете создать как бюджетную качественную работу, так и высокохудожественную реставрацию.

Паковка Meavest, Dentsply

Универсальная мелкодисперсная паковочная масса.
Способ разогрева: традиционный и шоковый.



Порошок 50 пакетов по 150 г (7,5 кг) (арт. 5325531001) — **1750 руб.**
Жидкость для шокового нагрева 1,35 л (арт. 5325400305) — **915 руб.**
Жидкость для медленного нагрева 1,35 л (арт. 5325400305) — **915 руб.**

- идеально подходит как для технологии быстрого нагрева, так и для традиционной техники работы;
- предназначена для всех типов сплавов: недорогих, полудрагоценных и благородных;
- высокая точность воспроизведения каждой детали восковой модели;
- контролируемое расширение;
- легко удаляется с объекта;
- оптимальная жесткость.

НОВИНКА!

Стоматологический сплав Mealloy

Для изготовления коронок и мостовидных протезов.
СПЕЦЦЕНА! 6 600 руб. / 159 €



- легко поддается литью и обработке, облегчая труд зубного техника, повышая его продуктивность и качество;
- тщательное тестирование сплава показало отличные характеристики химического и физического соединения сплава с широким спектром керамических масс;
- безопасен для зубных техников и пациентов, так как не содержит бериллий и имеет очень низкий уровень выхода ионов никеля;
- характеризуется высокой устойчивостью к образованию трещин и коррозии в полости рта, благодаря превосходным прочностным характеристикам;
- разработан и изготовлен в соответствии с международными стандартами качества.

АКЦИЯ!

Состав, % Ni — 62 / Cr — 25 / Mo — 9,5 / Si — 3,5

Удельный вес (плотность), г/см ³	8,2
Диапазон плавления	1230–1320 °С, 2250–2410 F
Твердость по Виккерсу, HV30	220
Модуль эластичности, МПа	200
Предел прочности при растяжении (на разрыв), МПа	>550
Растяжение, %	10
Коэффициент термического расширения	14,1:500 °С–25...500 °С / 14,2:600 °С–25...600 °С

Наборы керамики Ceramco³



Арт. 301602E

Набор базовый Ceramco³ Training Kit

(артикул 301609)

СУПЕРЦЕНА: 6 225 руб. / 150 €

- базовая паста, 2 мл;
- opak пастообразный А3, 2 мл;
- кристаллы светлые, 10 г;
- кристаллы средние, 10 г;
- opak-дентин А3, 15 г;
- дентин А3, 15 г;
- модификатор дентина А3.5, 15 г;
- эмаль натуральная *Light* светлая, 15 г;
- эмаль натуральная *Super Clear* суперпрозрачная, 15 г;
- эмаль опаловая *Light* светлая, 15 г;
- глазурь, 15 г;
- моделировочная жидкость Е, 100 мл;
- жидкость для красителей и глазури, 100 мл;
- кисть плоская для опака.

Набор из 8-ми цветов с пастообразным опакон (артикул 301602E)

89 179 руб. / 2 148,9 €

- 8 дентинов по 1 унции (А1, А2, А3, А3.5, В2, С3, D2, D3);
- 8 opak-дентинов по 1 унции (А1, А2, А3, А3.5, В2, С3, D2, D3);
- 4 модификатора дентина по 1 унции А1, А3.5, В1, С3;
- 5 натуральных эмалей по 1 унции (белая, очень светлая, светлая, средняя, прозрачная);
- 5 плечевых масс по 1 унции (А1, А3, В2, С1, С3);
- 8 opakов пастообразных по 2 мл (А1, А2, А3, А3.5, В2, С3, D2, D3);
- 3 шприца по 2 мл базовой пасты;
- 9 модификаторов опакон пастообразного по 3 мл (белый, желтый, сиена, голубой, серый, желто-коричневый, розовый, охра, оранжевый);
- кристаллы по 10 г (светлые, средние, темные);
- 3 бункера для кристаллов (для светлых, темных и светлых);
- 4 *Add-on* материалы для коррекции (белый, светлый, средний, темный);
- 10 красителей по 3 г (бледно-коричневый, бледно-желтый, бледно-оранжевый, белый, серый, розовый, фиолетовый, голубой, охра, коричневый);
- глазурь низкотемпературная, 1 унция;
- эмаль светлая с опаловым эффектом, 1 унция;
- 4 корректора опакон по 1 унции (светлый, средний, темный, белый);
- 5 кисточек (N0, N2, N4, красная, синяя);
- моделировочные жидкости U и E;
- компенсационный лак *Die Sealer*, 15 мл;
- лак изоляционный *Die Release*, 20 мл;
- жидкость для плечевой массы и корректора опакон, 15 мл;
- жидкость для модификатора опакон, 15 мл;
- жидкость для красителей и глазури, 100 мл;
- инструкция по эксплуатации.

Набор из 8-ми цветов с порошкообразным опакон (артикул 301603E)

86 324 руб. / 2 080,1 €

- 8 дентинов по 1 унции (А1, А2, А3, А3.5, В2, С3, D2, D3);
- 8 opak-дентинов по 1 унции (А1, А2, А3, А3.5, В2, С3, D2, D3);
- 4 модификатора дентина по 1 унции А1, А3.5, В1, С3;
- 5 натуральных эмалей по 1 унции (белая, очень светлая, светлая, средняя, прозрачная);
- 5 плечевых масс по 1 унции (А1, А3, В2, С1, С3);
- 8 opakов порошкообразных по 1 унции (А1, А2, А3, А3.5, В2, С3, D2, D3);
- 9 модификаторов опакон порошкообразного по 1 унции (белый, желтый, сиена, голубой, серый, желто-коричневый, розовый, охра, оранжевый);
- 4 материала для коррекции *Add-On* по 1 унции (белый, светлый, средний, темный);
- 10 красителей по 3 г (бледно-коричневый, бледно-желтый, бледно-оранжевый, белый, серый, розовый, фиолетовый, голубой, охра, коричневый);
- глазурь низкотемпературная, 1 унция;
- эмаль светлая с опаловым эффектом, 1 унция;
- 4 корректора опакон по 1 унции (светлый, средний, темный, белый);
- 5 кисточек (N0, N2, N4, красная, синяя);
- моделировочные жидкости U и E;
- компенсационный лак *Die Sealer*, 15 мл;
- лак изоляционный *Die Release*, 20 мл;
- жидкость для плечевой массы и корректора опакон, 15 мл;
- жидкость для модификатора опакон, 15 мл;
- жидкость для красителей и глазури, 100 мл;
- инструкция по эксплуатации.

Базовая паста является первичным покрытием, обеспечивающим сцепление со сплавом.
Один цвет для всех оттеночных паст.



Базовая паста (бондер)	2 мл 743 руб. / 17,9 €
Базовая паста для А1–D4	артикул 301040

Опак пастообразный	2 мл 743 руб. / 17,9 €
Опак пастообразный А1	артикул 301045
Опак пастообразный А2	артикул 301046
Опак пастообразный А3	артикул 301047
Опак пастообразный А3.5	артикул 301048
Опак пастообразный А4	артикул 301049
Опак пастообразный В1	артикул 301054
Опак пастообразный В2	артикул 301055
Опак пастообразный В3	артикул 301056
Опак пастообразный В4	артикул 301057
Опак пастообразный С1	артикул 301058
Опак пастообразный С2	артикул 301059
Опак пастообразный С3	артикул 301060
Опак пастообразный С4	артикул 301061
Опак пастообразный D2	артикул 301062
Опак пастообразный D3	артикул 301064
Опак пастообразный D4	артикул 301065
Опак пастообразный i1, i3*	артикул 301044
Опак пастообразный i2, i4*	артикул 301053
Опак пастообразный i5, i7*	артикул 301042
Опак пастообразный i6, i8*	артикул 301051

* i1–i8 — оттенки для отбеленных зубов.

Модификатор пастообразного опака	3 мл 1613 руб. / 38,87 €
Модификатор пастообразного опака Белый (<i>White</i>)	артикул 301070
Модификатор пастообразного опака Желтый (<i>Yellow</i>)	артикул 301071
Модификатор пастообразного опака Коричнево-желтый (<i>Sienna</i>)	артикул 301072
Модификатор пастообразного опака Голубой (<i>Blue</i>)	артикул 301073
Модификатор пастообразного опака Серый (<i>Gray</i>)	артикул 301074
Модификатор пастообразного опака Желто-коричневый (<i>Tan</i>)	артикул 301075
Модификатор пастообразного опака Розовый (<i>Pink</i>)	артикул 301076
Модификатор пастообразного опака Охра (<i>Ochre</i>)	артикул 301077
Модификатор пастообразного опака Оранжевый (<i>Orange</i>)	артикул 301078



Опак порошкообразный позволяет маскировать металлическое основание тонким ровным слоем. Имеет цвет естественных зубов и создает текстурированную поверхность, рассеивающую свет и придающую естественность изготавливаемой работе. Цвета по шкале VITA.

Опак порошкообразный	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €	4 унции (113,6 г) 4800 руб. / 115,67 €
Опак порошкообразный А1	артикул 301004	артикул 304008
Опак порошкообразный А2	артикул 301005	артикул 304009
Опак порошкообразный А3	артикул 301006	артикул 304010
Опак порошкообразный А3.5	артикул 301007	артикул 304011
Опак порошкообразный А4	артикул 301008	артикул 304012
Опак порошкообразный В1	артикул 301013	артикул 304013
Опак порошкообразный В2	артикул 301014	артикул 304014
Опак порошкообразный В3	артикул 301015	артикул 304015
Опак порошкообразный В4	артикул 301016	артикул 304016
Опак порошкообразный С1	артикул 301017	артикул 304017
Опак порошкообразный С2	артикул 301018	артикул 304018
Опак порошкообразный С3	артикул 301019	артикул 304019
Опак порошкообразный С4	артикул 301020	артикул 304020
Опак порошкообразный D2	артикул 301021	артикул 304021
Опак порошкообразный D3	артикул 301022	артикул 304022
Опак порошкообразный D4	артикул 301023	артикул 304023
Опак порошкообразный i1, 3*	артикул 301003	артикул 304000
Опак порошкообразный i2, 4*	артикул 301012	артикул 304001
Опак порошкообразный i5, 7*	артикул 301001	артикул 304004
Опак порошкообразный i6, 8*	артикул 301010	артикул 304005

* i1–i8 — оттенки для отбеленных зубов.

Модификаторы порошкообразного опака	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Модификатор порошкообразного опака Белый (<i>White</i>)	артикул 301030
Модификатор порошкообразного опака Желтый (<i>Yellow</i>)	артикул 301031
Модификатор порошкообразного опака Коричнево-желтый (<i>Sienna</i>)	артикул 301032
Модификатор порошкообразного опака Фиолетовый (<i>Violet</i>)	артикул 301033
Модификатор порошкообразного опака Серый (<i>Gray</i>)	артикул 301034
Модификатор порошкообразного опака Желто-коричневый (<i>Tan</i>)	артикул 301035
Модификатор порошкообразного опака Розовый (<i>Pink</i>)	артикул 301036
Модификатор порошкообразного опака Охра (<i>Ochre</i>)	артикул 301037
Модификатор порошкообразного опака Оранжевый (<i>Orange</i>)	артикул 301038



Опак-дентин обеспечивает дополнительный маскирующий эффект и однородность цвета.

Опак-дентин	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €	4 унции (113,6 г) 4800 руб. / 115,67 €
Опак-дентин А1	артикул 301104	артикул 304108
Опак-дентин А2	артикул 301105	артикул 304109
Опак-дентин А3	артикул 301106	артикул 304110
Опак-дентин А3.5	артикул 301107	артикул 304111
Опак-дентин А4	артикул 301108	артикул 304112
Опак-дентин В1	артикул 301113	артикул 304113
Опак-дентин В2	артикул 301114	артикул 304114
Опак-дентин В3	артикул 301115	артикул 304115
Опак-дентин В4	артикул 301116	артикул 304116
Опак-дентин С1	артикул 301117	артикул 304117
Опак-дентин С2	артикул 301118	артикул 304118
Опак-дентин С3	артикул 301119	артикул 304119
Опак-дентин С4	артикул 301120	артикул 304120
Опак-дентин D2	артикул 301121	артикул 304121
Опак-дентин D3	артикул 301122	артикул 304122
Опак-дентин D4	артикул 301124	артикул 304123
Опак-дентин i1*	артикул 301103	артикул 304100
Опак-дентин i2*	артикул 301112	артикул 304101
Опак-дентин i3*	артикул 301102	артикул 304102
Опак-дентин i4*	артикул 301111	артикул 304103
Опак-дентин i5*	артикул 301101	артикул 304104
Опак-дентин i6*	артикул 301110	артикул 304105
Опак-дентин i7*	артикул 301100	артикул 304106
Опак-дентин i8*	артикул 301109	артикул 304107

* i1–i8 — оттенки для отбеленных зубов.



Плечевая масса для пришеечных зон.

Плечевая масса Margin	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Плечевая масса А1 (для А1, А2)	артикул 301903
Плечевая масса А3 (для А3, А3.5, В3, D3, D4)	артикул 301904
Плечевая масса А4 (для А4, В4)	артикул 301905
Плечевая масса В2 (для В1, В2)	артикул 301906
Плечевая масса С1 (для С1, С2, D2)	артикул 301907
Плечевая масса С3 (для С3, С4)	артикул 301908
Плечевая масса Белая (White)	артикул 301909
Плечевая масса Персиковая (Peach)	артикул 301910
Плечевая масса Медово-желтая (Honey-Yellow)	артикул 301911
Плечевая масса Желто-красная (Yellow-Red)	артикул 301913
Плечевая масса Оранжево-коричневая (Orange-Brown)	артикул 301914
Плечевая масса Зелено-коричневая (Green-Brown)	артикул 301915
Плечевая масса i1 (для i1, i3)*	артикул 301900
Плечевая масса i2 (для i2, i4)*	артикул 301901
Плечевая масса i5 (для i5, i6, i7, i8)*	артикул 301902

* i1–i8 — оттенки для отбеленных зубов



Цвета по шкале VITA, а также оттенки для отбеленных зубов.

Дентин	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €	4 унции (113,6 г) 4800 руб. / 115,67 €
Дентин А1	артикул 301134	артикул 304138
Дентин А2	артикул 301135	артикул 304139
Дентин А3	артикул 301136	артикул 304140
Дентин А3.5	артикул 301137	артикул 304141
Дентин А4	артикул 301138	артикул 304142
Дентин В1	артикул 301143	артикул 304143
Дентин В2	артикул 301144	артикул 304144
Дентин В3	артикул 301145	артикул 304145
Дентин В4	артикул 301146	артикул 304146
Дентин С1	артикул 301147	артикул 304147
Дентин С2	артикул 301148	артикул 304148
Дентин С3	артикул 301149	артикул 304149
Дентин С4	артикул 301150	артикул 304150
Дентин D2	артикул 301151	артикул 304151
Дентин D3	артикул 301152	артикул 304152
Дентин D4	артикул 301153	артикул 304153
Дентин i1*	артикул 301133	артикул 304130
Дентин i2*	артикул 301142	артикул 304131
Дентин i3*	артикул 301132	артикул 304132
Дентин i4*	артикул 301141	артикул 304133
Дентин i5*	артикул 301131	артикул 304134
Дентин i6*	артикул 301140	артикул 304135
Дентин i7*	артикул 301130	артикул 304136
Дентин i8*	артикул 301139	артикул 304137

* i1-i8 — оттенки для отбеленных зубов.



Модификатор дентина используется для индивидуализации работы.

Модификатор дентина	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Модификатор дентина А1, А2, А3, D2, i1, i3	артикул 301160
Модификатор дентина А3.5, А4	артикул 301161
Модификатор дентина В1, В2, D3, i2, i4	артикул 301162
Модификатор дентина В3, В4	артикул 301163
Модификатор дентина С1, С2	артикул 301164
Модификатор дентина С3, С4, D4	артикул 301165
Модификатор дентина Белый (White)	артикул 301166
Модификатор дентина Голубой (Blue)	артикул 301167
Модификатор дентина Желтый (Yellow)	артикул 301168
Модификатор дентина Фиолетовый (Violet)	артикул 301169
Модификатор дентина Серый (Gray)	артикул 301170
Модификатор дентина Розовый (Pink)	артикул 301171



Эмаль натуральная	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €	4 унции (113,6 г) 4800 руб. / 115,67 €
Эмаль Белая (White)	артикул 301200	артикул 304200
Эмаль Очень светлая (Extra light)	артикул 301201	артикул 304201
Эмаль Светлая (Light)	артикул 301202	артикул 304202
Эмаль Средняя (Medium)	артикул 301203	артикул 304203
Эмаль Темная (Dark)	артикул 301204	артикул 304204
Эмаль Слоновая кость (Ivory)	артикул 301205	артикул 304205
Эмаль Прозрачная (Clear)	артикул 301211	артикул 304206
Эмаль Супер Прозрачная (Super Clear)	артикул 301212	артикул 304207
Эмаль Фиолетовая (Violet)	артикул 301206	артикул 304208
Эмаль Оранжевая (Orange)	артикул 301207	артикул 304209
Эмаль Голубая (Blue)	артикул 301208	артикул 304210
Эмаль Розовая (Pink)	артикул 301209	артикул 304211
Эмаль Желтая (Yellow)	артикул 301210	



Эмаль с опаловым эффектом позволяет лучше имитировать передачу и отражение света, характерные для натуральных зубов. Опаловые эмали рассеивают больше света, уменьшая серые оттенки покрытия модели и улучшая эффект опалесценции.

Эмаль с опаловым эффектом	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Эмаль опаловая Белая (White)	артикул 301220
Эмаль опаловая Светлая (Light)	артикул 301221
Эмаль опаловая Средняя (Medium)	артикул 301222
Эмаль опаловая Прозрачная (Clear)	артикул 301223

* Таблица соответствия натуральных и опаловых эмалей в Приложении 1.



Низкотемпературная глазурь используется для придания естественного блеска готовой керамической работе. Снижает вероятность появления трещин при последнем обжиге.

Глазурь низкотемпературная	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Глазурь Overglaze	артикул 301322



Моделировочная жидкость для разбавления керамического порошка, благодаря чему керамика дольше остается в рабочем состоянии.

Моделировочные жидкости	100 мл 1166 руб. / 28,09 €
Моделировочная жидкость U (универсальная)	артикул 301126
Моделировочная жидкость E (с увеличенным рабочим временем)	артикул 301127



Масса интенсивного цвета для создания естественного эффекта мамелонов. Можно смешивать с другими компонентами для индивидуализации работы.

Мамелон	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Мамелон красно-оранжевый (<i>Red-Orange</i>)	артикул 301230
Мамелон желто-оранжевый (<i>Yellow-Orange</i>)	артикул 301231



Кристаллы обеспечивают эффект рассеивания света, что улучшает цветовоспроизведение. Придают эффект флуоресценции.

Кристаллы	10 г 1439 руб. / 34,68 €
Кристаллы Белые (<i>White</i>)*	артикул 301080
Кристаллы Светлые (<i>Light</i>)	артикул 301081
Кристаллы Средние (<i>Medium</i>)	артикул 301082
Кристаллы Темные (<i>Dark</i>)	артикул 301083

* Только для оттенков i1–i8 для отбеленных зубов.

Таблица соответствия

Цвет	Кристаллы, используемые после нанесения базовой пасты	Кристаллы, используемые после нанесения опакующей пасты выбранной расцветки
i1–i8*	Белые	Светлые
A1	Средние (<i>Medium</i>)	Светлые (<i>Light</i>)
A2	Средние	Светлые
A3	Средние	Светлые
A3.5	Темные (<i>Dark</i>)	Светлые
A4	Темные	Светлые
B1	Средние (<i>Medium</i>)	Светлые (<i>Light</i>)
B2	Средние	Светлые
B3	Темные (<i>Dark</i>)	Светлые
B4	Темные	Светлые
C1	Средние (<i>Medium</i>)	Светлые (<i>Light</i>)
C2	Темные	Светлые
C3	Темные (<i>Dark</i>)	Светлые
C4	Темные	Светлые
D1	Средние (<i>Medium</i>)	Светлые
D2	Темные	Светлые
D3	Средние	Светлые

* i1–i8 — оттенки для отбеленных зубов



Материалы для коррекции используются для ремонта протезов и подкрашивания поверхностей.

Материалы для коррекции	1 унция (28,4 г) 1389 руб. / 33,46 €
Материал для коррекции Add-On Прозрачный (<i>Translucent</i>)	артикул 301400
Материал для коррекции Add-On Белый (<i>White</i>)	артикул 301401
Материал для коррекции Add-On Светлый (<i>Light</i>)	артикул 301402
Материал для коррекции Add-On Средний (<i>Medium</i>)	артикул 301403
Материал для коррекции Add-On Темный (<i>Dark</i>)	артикул 301404
Материал для коррекции искусственной десны <i>Tissue Tint</i> Розовый (<i>Pink</i>)	артикул 301405
Материал для коррекции искусственной десны <i>Tissue Tint</i> Красно-розовый (<i>Reddish Pink</i>)	артикул 301406
Материал для коррекции искусственной десны <i>Tissue Tint</i> Лососевый (<i>Salmon</i>)	артикул 301407
Материал для коррекции искусственной десны <i>Tissue Tint</i> Темный (<i>Dark</i>)	артикул 301408
Корректор опака Светлый (<i>Light</i>)	артикул 301410
Корректор опака Светлый (<i>Medium</i>)	артикул 301411
Корректор опака Светлый Темный (<i>Dark</i>)	артикул 301412
Корректор опака Светлый Белый (<i>White</i>)	артикул 301413

Жидкости	Артикул	15 мл
Жидкость для плечевой массы и корректора опака (<i>Margin & Opaque Corrector Liquid</i>), 15 мл	артикул 301916	521 руб. / 12,56 €
Лак компенсационный <i>Die Sealer</i> , 15 мл	артикул 4010802	1282 руб. / 30,89 €
Лак изоляционный <i>Die Release</i> , 15 мл	артикул 4010803	1266 руб. / 30,5 €
Жидкость для красителей и глазури (<i>Stain and Glaze Liquid</i>), 100 мл	артикул 301325	1389 руб. / 33,46 €
Жидкость для модификаторов, 15 мл	артикул 301084	667 руб. / 16,08 €



артикул 301084



артикул 301325



артикул 4010802



Красители повышают точность цвета. Тонкое воспроизведение цветовых особенностей позволяет улучшить эстетические свойства реставрации. Большой выбор красителей уменьшает необходимость смешивания красок.


Краситель	1 унция (28,4 г) 810 руб. / 19,51 €
Краситель Белый (<i>White</i>)	артикул 301500
Краситель Серый (<i>Gray</i>)	артикул 301501
Краситель Серо-коричневый (<i>Shale</i>)	артикул 301502
Краситель Розовый (<i>Rose</i>)	артикул 301504
Краситель Фиолетовый (<i>Violet</i>)	артикул 301505
Краситель Голубой (<i>Blue</i>)	артикул 301506
Краситель Зеленый (<i>Green</i>)	артикул 301507
Краситель Банановый (<i>Banana</i>)	артикул 301508
Краситель Охра (<i>Ochre</i>)	артикул 301509
Краситель Персиковый (<i>Peach</i>)	артикул 301510
Краситель Янтарный (<i>Amber</i>)	артикул 301511
Краситель Коричневый (<i>Brown</i>)	артикул 301512
Краситель Желтый (<i>Yellow</i>)	артикул 301513
Краситель Оранжевый (<i>Orange</i>)	артикул 301514
Краситель Светло-коричневый (<i>Brown Tint</i>)	артикул 301515
Краситель Светло-желтый (<i>Yellow Tint</i>)	артикул 301516
Краситель Светло-оранжевый (<i>Orange Tint</i>)	артикул 301517

* Таблица обжига в градусах Цельсия в Приложении 2.



Аксессуары	Артикул	Цены
Бункер для кристаллов Белых (<i>White</i>)	артикул 301090	1536 руб. / 37 €
Бункер для кристаллов Светлых (<i>Light</i>)	артикул 301087	1536 руб. / 37 €
Бункер для кристаллов Средних (<i>Medium</i>)	артикул 301088	1536 руб. / 37 €
Бункер для кристаллов Темных (<i>Dark</i>)	артикул 301089	1536 руб. / 37 €
Кисть плоская синяя	артикул 259041	591 руб. / 14,23 €
Кисть плоская красная	артикул 259042	591 руб. / 14,23 €
Расцветка для дентинов	артикул 301522	5325 руб. / 128,32 €
Расцветка для эмалей	артикул 301523	5325 руб. / 128,32 €
Расцветка для модификатора дентина	артикул 301524	5325 руб. / 128,32 €
Расцветка для плечевой массы	артикул 301525	5325 руб. / 128,32 €
Расцветка для красителей	артикул 301526	5325 руб. / 128,32 €

Керамическая масса Ceramco PFZ для изготовления реставраций на циркониевых каркасах

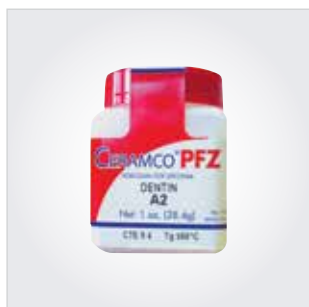

- может использоваться с любыми циркониевыми каркасами;
- обладает высокой степенью прозрачности глубины цвета;
- естественные эффекты опалесценции, прозрачности и глубины цвета;
- превосходная температурная стабильность;
- прекрасный эстетический результат;
- простота и легкость использования, присущая всем керамическим массам Ceramco;
- 100% биологическая совместимость. Гипоаллергенность (не вызывает воспаления десен);
- высокая прочность и долговечность изготавливаемой работы.

Продукция под заказ!

Печь для обжига керамики Multimat Easy в комплекте с вакуумным насосом

СУПЕРЦЕНА: 209 575 руб. / 5 050 €



- двухстрочный дисплей;
- 100 программ;
- легкое управление;
- USB-порт для обновления программного обеспечения и резервного копирования;
- автоматическая защита от перепадов напряжения в сети;
- три уровня охлаждения;
- надежный режим обжига.

Технология

Современный технический уровень: надежный муфель и спираль в кварцевом стекле гарантируют равномерное распределение тепла внутри камеры обжига. Это улучшает результаты обжига: надежное и стабильное качество, повторяющееся от этапа к этапу.



Дисплей

Панель управления обладает высокой функциональностью и моментально выдает всю необходимую информацию и параметры режима. Двухрядный дисплей отображает данные и сообщения, касающиеся текущего процесса обжига керамики.



Мощный процессор

Современный процессор с высокой тактовой частотой, новейшие разработки в технологии используемого сенсора, интегрированный температурный контроль: все это делает печи *Multimat Easy* еще более надежными.

Печь для обжига и пресования керамики Multimat NTX Press в комплекте с вакуумным насосом

361050 руб. / 8700 €



- подходит для пресования любой пресс-керамики;
- широкий противобликовый сенсорный экран 5.7";
- температура обжига 1200 °C;
- уникально простое управление;
- два USB-порта для обновления программного обеспечения и резервного копирования;
- 32-битный процессор с тактовой частотой 200 МГц;
- автоматическая защита от перепадов напряжения;
- высокая точность обжига благодаря современной технологии контроля;
- компактный дизайн — узкое основание;
- кривая обжига графически изображается на сенсорном экране и может быть настроена индивидуально;
- понятное меню и управление через сенсорный экран;
- немедленный доступ к основным режимам обжига через графические символы на панели управления;
- объемная память для хранения 1000 режимов обжига, что соответствует 100 типам керамики;
- обмен данными между печью и ПК через USB-накопитель;
- хранение, обработка и распечатка таблиц и протоколов обжига упрощается благодаря быстрому соединению с ПК;
- удобное обслуживание;
- практически неограниченное хранение данных после отключения электропитания.

Печь для обжига керамики Multimat NTX в комплекте с вакуумным насосом 346525 руб. / 8350 €



- широкий противобликовый сенсорный экран 5.7";
- температура обжига 1200 °С;
- уникально простое управление;
- два USB-порта для обновления программного обеспечения и резервного копирования;
- 32-битный процессор с тактовой частотой 200 МГц;
- 1000 программ, автоматическая защита от перепадов напряжения;
- высокая точность обжига благодаря современной технологии контроля;
- компактный дизайн — узкое основание;
- кривая обжига графически изображается на сенсорном экране и может быть настроена индивидуально;
- понятное меню и управление через сенсорный экран;
- немедленный доступ к основным режимам обжига через графические символы на панели управления;
- объемная память для хранения 1000 режимов обжига, что соответствует 100 типам керамики;
- обмен данными между печью и ПК через USB-накопитель;
- просмотр изображений и видеоклипов на 5.7" TFT экране;
- хранение, обработка и распечатка таблиц и протоколов обжига упрощается благодаря быстрому соединению с ПК;
- удобное обслуживание;
- практически неограниченное хранение данных после отключения электропитания.

Воска моделировочные и пришеечные GIANT WAX, 75 г

- высококачественный воск с минимальной усадкой;
- жесткий воск, но при этом не хрупкий;
- лучшая стабильность в расплавленном состоянии;
- позволяет моделировать мельчайшие фиссуры;
- два вида воска в одном — моделировочный и пришеечный — позволяют экономить время и повышают удобство в работе.

НОВИНКА!



Wax GIANT два в одном

Моделировочный воск со вставкой пришеечного воска.

871 руб. / 21,5 €



● песочный (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный)	артикул 733-5001
● серый (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный)	артикул 735-5001
● синий (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный)	артикул 737-5000

Wax GIANT

766 руб. / 18,9 €



● пришеечный воск красный (прозрачный)	артикул 731-5000
● моделировочный воск песочный (непрозрачный)	артикул 732-5001
● моделировочный воск серый (непрозрачный)	артикул 734-5001
● моделировочный воск синий (прозрачный)	артикул 736-5000

Приложение 1

Таблица соответствия натуральных и опаловых эмалей

Цвет	Натуральные основные эмали	Опаловые эмали	Натуральные цветные эмали
A1	Светлая (<i>Light</i>) или Очень Светлая (<i>Extra Light</i>)	Опаловая светлая (<i>Opal Light</i>)	Используются для придания индивидуальных характеристик. Могут смешиваться с натуральными основными эмальями, опаловыми эмальями или использоваться в чистом виде. Доступные цвета: Слоновая кость (<i>Ivory</i>), Фиолетовый (<i>Violet</i>), Оранжевый (<i>Orange</i>), Голубой (<i>Blue</i>), Розовый (<i>Pink</i>), Желтый (<i>Yellow</i>).
A2	Светлая	Опаловая светлая	
A3	Светлая или средняя (<i>Medium</i>)	Опаловая светлая или опаловая средняя (<i>Opal Medium</i>)	
A3.5	Средняя или темная (<i>Dark</i>)	Опаловая средняя	
A4	Темная	Опаловая средняя	
B1	Светлая или очень светлая	Опаловая светлая	
B2	Светлая	Опаловая светлая	
B3	Светлая или средняя	Опаловая светлая или опаловая средняя	
B4	Средняя или темная	Опаловая средняя	
C1	Светлая или очень светлая	Опаловая светлая	
C2	Светлая	Опаловая светлая	
C3	Светлая или средняя	Опаловая светлая или опаловая средняя	
C4	Средняя или темная	Опаловая средняя	
D2	Очень светлая или светлая	Опаловая светлая	
D3	Светлая или средняя	Опаловая светлая или средняя	
D4	Светлая или средняя	Опаловая светлая	
i1	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i2	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i3	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i4	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i5	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i6	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i7	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	
i8	Белая (<i>White</i>)	Опаловая белая (<i>Opal White</i>)	

Приложение 2

Таблица обжига, °C

	Сушка, мин	Преднагрев, мин	Выдержка в вакууме, мин	Начальная темп-ра	Конечная темп-ра	Выдержка при конечной темп-ре, мин	Темп-ра начально-го обжига в вакууме	Темп-ра окончатель-ного обжига в вакууме	Скорость повышения темп-ры, °C/мин
Пастообразный опак	5–8	5–8	0	450–500	975		450–500	975	100
Порошкообразный опак	5	5	0	450–500	970	0	450–500	950	70
Плечевая масса	5	5	0	450–500	965	0	450–500	945	70
I. Опак-дентин / дентин / эмаль	5–8	5–8	0	450–500	940	0 (или 1 мин. для мостов большой протяженности)	450–500	920	60
II. Дентин / эмаль	5	5	0	450–500	930	0	450–500	910	60
III. Дентин / эмаль	5	5	0	450–500	920	0	450–500	900	60
Add-on	3–5	3–5	0	450–500	915	0	450–500	900	60
Самоглазурирование	3	3	0	450–500	920 (если не использовался Add-on)	1	0	0	70
Глазурь	3	3	0	450–500	900–910	1	0	0	70